

WWW.ATLANTIS-BS.EU

CORNER SHOWER STOOL





ATLANTIS
BATHROOMSOLUTIONS

FOR **YOUR** SAFETY AND COMFORT

EN

Corner shower stool

Please inspect all parts carefully for cracks / breaks prior to use.

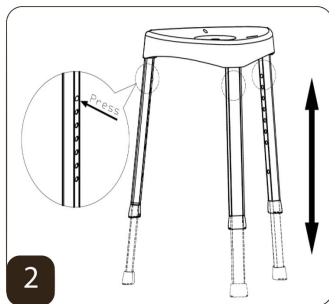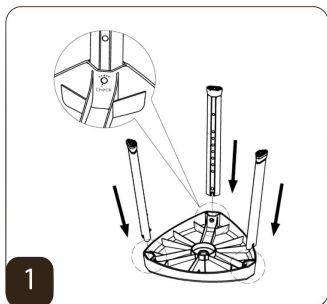

User instructions:

Make sure all legs are adjusted to the same height. Snap buttons must fully protrude through the adjustment hole of each leg extension to ensure a positive lock.

This stool is intended for use in the shower. There is no back support, so do not lean back when sitting on this stool!

Care and Maintenance:

Clean after each use with mild soap and water, then towel dry.



Maximum
user weight:



- DO NOT LEAN BACK when sitting on this stool; it may tip and user can fall.
- Persons with severe disabilities or persons who are unable to walk without an aide should not attempt to use this product without assistance.

FOR YOUR SAFETY AND COMFORT

Controleer alle onderdelen nauwkeurig op scheuren / breuken vóór gebruik.

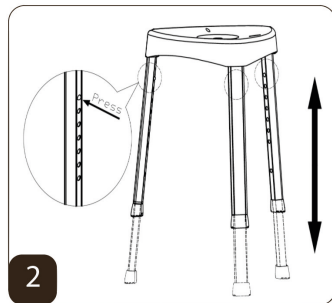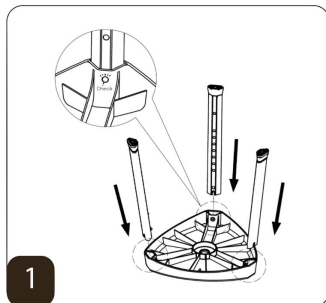

Gebruiksaanwijzing:

Controleer of alle poten op gelijke hoogte zijn ingesteld. Verstelknoppen moeten volledig door het verstelgat van elke uitschuifbare poot uitsteken om een positieve vergrendeling te garanderen. Dit krukje is bedoeld voor gebruik in de douche. Er is geen rugleuning, dus leun niet achterover als u op dit krukje zit!

Verzorging en onderhoud:

Na gebruik reinigen met een mild reinigingsmiddel en water, daarna droog afvegen.

Maximaal
gebruikersgewicht:





- NIET ACHTEROVER LEUNEN als u op dit krukje zit; dit kan kantelen waardoor de gebruiker kan vallen.
- Mensen met een ernstige handicap of mensen die niet zonder hulpmiddel kunnen lopen, moeten niet proberen dit product te gebruiken zonder dat hulp aanwezig is.

FR

Tabouret de douche pour angle

Avant l'utilisation, veuillez contrôler toutes les pièces quant à l'absence de fissures / cassures.

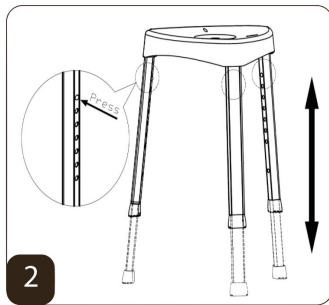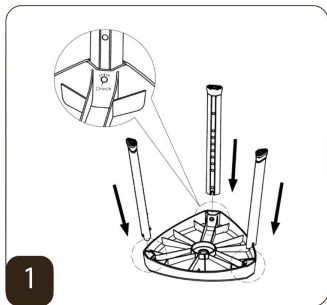

Montage:

Veiller à ce que tous les pieds soient réglés à la même hauteur. Le bouton doit être entièrement sorti du trou pour chaque pied, afin que tous les pieds soient solidement verrouillés. Ce tabouret doit être utilisé dans la douche. Il ne comporte pas de dossier. Ne vous penchez donc pas en arrière lorsque vous l'utilisez!

Nettoyage et entretien:

Après usage, nettoyer avec un détergent doux et de l'eau, puis sécher en essuyant.



Poids utilisateur maximum:



- NE VOUS PENCHEZ PAS EN ARRIÈRE lorsque vous êtes assis sur le tabouret; il pourrait basculer et vous pourriez tomber.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par les personnes lourdement handicapées ou qui ne peuvent pas se déplacer sans une aide à la marche, à moins qu'elles ne disposent d'une personne qui les assiste.

FOR YOUR SAFETY AND COMFORT

Bitte prüfen Sie alle Teile sorgfältig auf Risse / Bruchstellen vor der Verwendung.

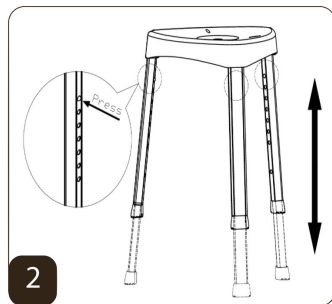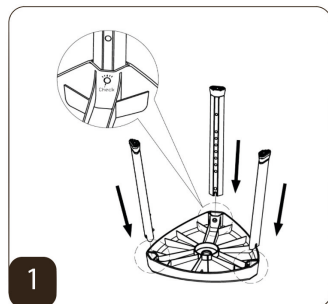

Bedienungsanleitung:

Sicherstellen, dass alle Beine auf der gleichen Höhe eingestellt sind. Druckknöpfe müssen vollständig durch das Einstellloch von jedem Beinausleger herausragen, um einen Formschluss zu gewährleisten. Dieser Hocker ist für die Verwendung in der Dusche vorgesehen. Der Hocker hat keine Rückenlehne, lehnen Sie sich deshalb nicht zurück, wenn Sie auf diesem Hocker sitzen!

Pflege und Wartung:

Nach jedem Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser reinigen, dann trockenwischen.

Maximales
Benutzergewicht:





- SIE SOLLTEN SICH NICHT ZURÜCKLEHNEN, wenn Sie auf diesem Hocker sitzen; der Hocker kann kippen, wodurch der Benutzer fallen kann.
- Menschen mit schweren Behinderungen oder Menschen, die nicht ohne Hilfe gehen können, sollten nicht versuchen, dieses Produkt zu verwenden, ohne dass Hilfe verfügbar ist.

ES

Taburete de ducha para esquinas

Por favor revise todos los elementos en busca de posibles grietas / roturas antes de usarlos.

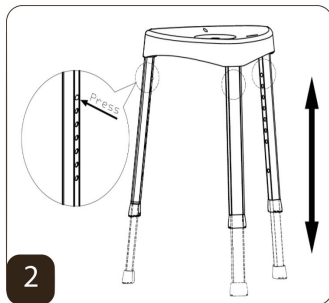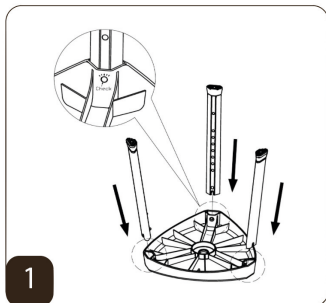

Leer las instrucciones:

Asegúrese de que las patas están ajustadas a la misma altura. Los botones de ajuste de altura deben sobresalir totalmente a través del orificio de ajuste de cada extensión de la pata. Este taburete es para uso en la ducha. No tiene respaldo, por eso ¡no recostarse mientras sentado en este taburete!

Mantenimiento:

Limpie con jabón suave y seque completamente.

Peso máximo
del usuario:





- NO REPOSTARSE cuando se sienta en este taburete; esto puede inclinar causando la caída del usuario.
- Las personas con una discapacidad severa o personas que no pueden caminar sin ayuda no deben intentar utilizar este producto sin ayuda disponible.

FOR YOUR SAFETY AND COMFORT

PT

Banco de chuveiro de ângulo

Por favor, inspecione se existem algum buraco ou rachaduras antes de usar.

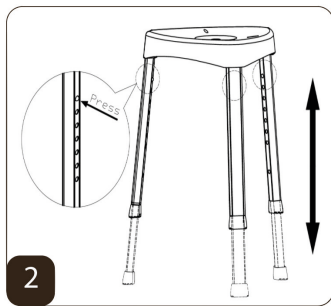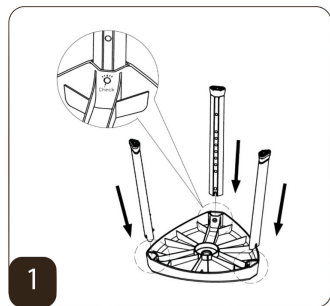

Ler as instruções:

Certifique-se que as pernas são ajustados para a mesma altura. Os botões de ajuste de altura deve estender completamente o buraco de reajuste de cada extensão da perna. Este banco destina-se a ser utilizado no chuveiro. Não possui encosto, por isso não se encoste para trás quando estiver sentado nele!

Manutenção:

Limpe com sabão neutro e seque bem.

Peso máximo
do utilizador:



- NÃO SE INCLINE PARA TRÁS quando estiver sentado no banco de chuveiro; este pode virar e provocar a sua queda.
- As pessoas com uma deficiência grave ou que não podem caminhar sem um meio de auxílio não devem tentar utilizar este produto sem ajuda.

WWW.ATLANTIS-BS.EU



ATLANTIS

BATHROOMSOLUTIONS



Distributed by:

ABLE2 EUROPE BV
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
The Netherlands
www.able2.nl

ABLE2 UK
www.able2.eu

ABLE2 SPAIN
www.able2.es



VALENTINE INTERNATIONAL Ltd.
8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road
221 Hsichih District, New Taipei City Taiwan R.O.C.



Y. SUNG
HANDELSVERTRETUNG
Duesselthaler Str. 24
40211 Duesseldorf
Germany



MADE IN TAIWAN

Able2